



# Healthy Tracks™

## for Pets

### LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE

For use only on Dogs and Cats. NOT FOR HUMAN USE.

For use with Healthy Tracks for Pets™ lancet to obtain a capillary whole blood sample for blood glucose testing.

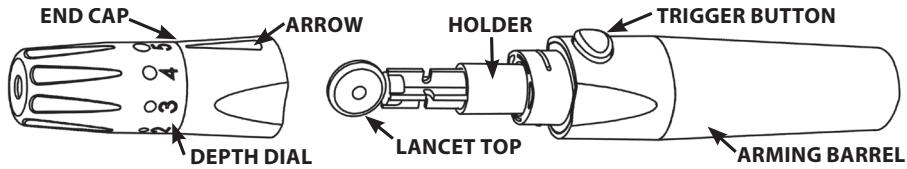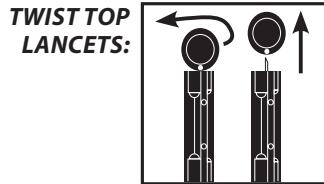

#### **WARNING!**


The lancing device is for single patient (dog or cat) use **ONLY. DO NOT** share it with other animals. **DO NOT** use on multiple animals. **ALL** parts of the lancing device are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases, even after you have performed cleaning and disinfection.

#### **CAUTION!**

**Lancets are for single use only. Do not re-use. Do not use lancet if Lancet Top has been previously removed.** Wash your hands thoroughly with soap and water before and after handling the meter, lancing device, or test strips to prevent the transfer of blood-borne pathogens.

#### - R E A D Y -

- ① Pull off End Cap.  
Push lancet firmly into Holder.
- ② Remove Lancet Top.  
**Save Lancet Top for safe disposal of used lancet.**
- ③ Replace End Cap.

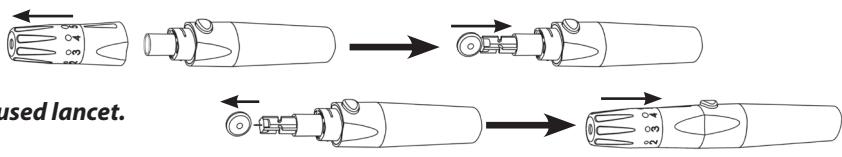


#### - S E T -

- ① Turn Depth Dial to desired lancing depth.  
**Finer adjustments can be made by setting Arrow between numbers.**

Suggested Lancing Depth:  
 • 3-5 – ear  
 • 4-5 – paw pad



- ② Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until you hear a click.

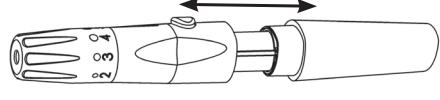


#### - L A N C E -

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wash your hands and the test site (e.g. ear or paw pad) with warm water and soap to ensure accurate results. Rinse and dry thoroughly. You may also use an alcohol wipe to clean the test site. Allow the test site to dry thoroughly before testing. Gently massage the test site or apply a warm cloth to help the blood drop form.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Place lancing device tip firmly against the test site and press the Trigger Button. Remove lancing device and set aside. Allow blood drop to form. <b>Important!</b> When lancing the ear, it is recommended that you place a cotton ball on the opposite side of the animal's ear to protect your finger.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. After testing, pull off End Cap. Place the saved Lancet Top flat on a firm surface and push the exposed lancet tip into the Lancet Top. Remove the lancet from the Holder and discard the used lancet into a suitable container.</li> </ol>	

A capillary blood sample can be taken from the ear or paw pad in dogs and cats.

**Ask your veterinarian for instructions on getting a blood sample from the ear or paw pad.**

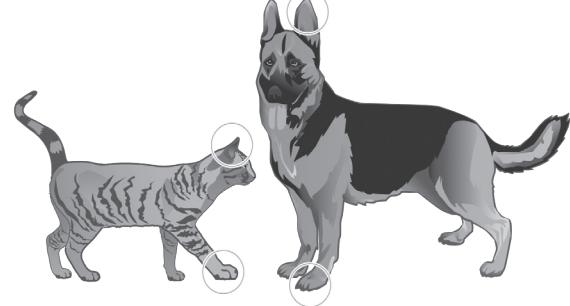

Refer to the Owner's Booklet for complete information about the Test Buddy™ Pet-Monitoring Blood Glucose System and instructions on how to obtain a blood glucose reading.

#### - L A N C I N G D E V I C E C L E A N I N G A N D D I S I N F E C T I N G -

- Cleaning and disinfecting is a two-step process. The first step is cleaning. Cleaning removes any blood, liquids, dust, or dirt. The second step is disinfecting. Disinfecting removes most, but not all possible infectious agents, including blood-borne pathogens. **Cleaning must be done before disinfecting.**
- Clean the lancing device immediately after getting any blood on it or if it is dirty.
- Remove lancet from lancing device before cleaning.
- Clean and disinfect the lancing device at least once a week. The lancing device may be cleaned and disinfected once a day for a 3-year period.
- **Use only PDI Super Sani-Cloth® Wipes** (EPA Reg. No. 9480-4). Other disinfectants have not been tested and may damage the lancing device. PDI Super Sani-Cloth Wipes may be purchased at: Amazon.com, Officedepot.com (or your local Office Depot store), or Walmart.com.
- PDI Super Sani-Cloth Wipes have been tested on the lancing device for a total of 1,095 cleaning and disinfecting cycles, which is equal to cleaning and disinfecting the lancing device once a day for a 3-year period.

	<b>To Clean the Lancing Device:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wash hands thoroughly with soap and water.</li> <li>2. Thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device with one Super Sani-Cloth by wiping in circles 3 times. Discard the used cloth.</li> </ol>
	<b>To Disinfect the Lancing Device:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Always clean the lancing device immediately before disinfecting</b> (see instructions above).</li> <li>2. Remove a fresh Super Sani-Cloth and thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device by wiping in circles 3 times. Make sure that you go over the entire lancing device.</li> <li>3. Using fresh cloths, if needed, <b>make sure that all outside surfaces of the lancing device stay wet for 2 minutes by patting with the cloth.</b> Discard used cloths.</li> <li>4. Let the lancing device air dry thoroughly before using.</li> <li>5. Gently pull back the Arming Barrel and press the Trigger Button. You will hear a click if the lancing device is functioning properly.</li> <li>6. Wash hands thoroughly when finished.</li> </ol>

**Important!** Stop using the lancing device and contact Customer Care for assistance, if:

- Markings on lancing device are coming off
- Trigger Button is hard to push
- End Cap does not go back on
- Arming Barrel does not click when gently pulled back

Manufactured for:

**TRIVIDIA**  
HEALTH™  
Fort Lauderdale, FL 33309 USA  
1-800-803-6025

Made in China • S3HTK06 Rev. 2

Call Customer Care at 1-800-803-6025, Mon. - Fri., 8AM - 8PM EST.

© 09/2020 Trividia Health, Inc. Healthy Tracks for Pets, Test Buddy and the Trividia Health logo are trademarks of Trividia Health, Inc.



# Healthy Tracks™ for Pets

## INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

Para uso exclusivo en perros y gatos. **NO APTO PARA USO EN HUMANOS.**

Se utiliza con la lanceta Healthy Tracks for Pets™ para obtener una muestra de sangre capilar completa a fin de realizar pruebas de glucosa en la sangre.

### LANCETAS CON CUBIERTA PARA GIRAR:

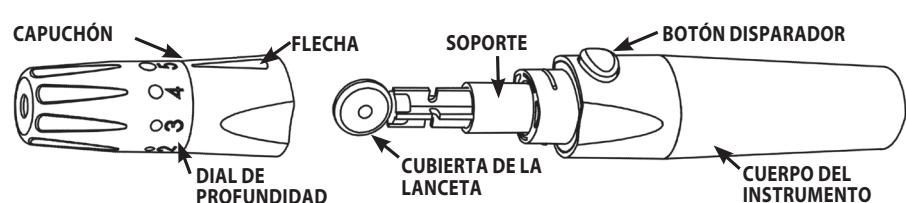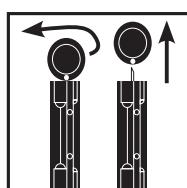

### ¡ADVERTENCIA!

El dispositivo de punción es para uso en un solo paciente (perro o gato) **ÚNICAMENTE. NO** lo comparta con otros animales. **NO** lo use para varios animales. **TODAS** las piezas del dispositivo de punción se consideran materiales con riesgo biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de su limpieza y desinfección.

### ¡PRECAUCIÓN!

**Las lancetas son para un solo uso. No vuelva a utilizarlas. No use la lanceta si se le ha quitado la cubierta previamente.** Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras de prueba para evitar la transmisión de patógenos contenidos en la sangre.

### - P R E P A R A D O -

- 1 Quite el capuchón. Presione la lanceta dentro del soporte con firmeza.
- 2 Quite la cubierta de la lanceta. **Guarde la cubierta de la lanceta para desechar de manera segura la lanceta usada.**
- 3 Vuelva a colocar el capuchón.




- 1 Ajuste el dial a la profundidad de punción deseada. **Se pueden realizar ajustes más finos colocando la flecha entre los números.**

Profundidad de punción recomendada:

- 3-5 en la oreja
- 4-5 en la almohadilla de la pata



- 2 Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del instrumento con la otra. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del dispositivo hasta que escuche un clic.

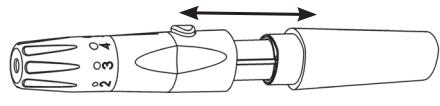

### - L I S T O -

1. Lávese las manos y lave el sitio de la punción (p. ej., la oreja o la almohadilla de la pata) con agua tibia y jabón para garantizar que los resultados sean exactos. Enjuague y seque bien. También puede usar un paño con alcohol para limpiar el sitio de la punción. Deje que el sitio de la punción se seque bien antes de realizar la prueba.  
Masajee suavemente el sitio de la punción o aplique un paño tibio para ayudar a que se forme la gota de sangre.
2. Coloque firmemente la punta del dispositivo de punción sobre el sitio de la punción y presione el botón disparador. Retire el dispositivo de punción y déjelo a un lado. Deje que se forme una gota de sangre.  
**Importante!** Cuando haga una punción en la oreja, se recomienda colocar una pequeña bola de algodón en el lado contrario de la oreja del animal para protegerse el dedo de la mano.
3. Despues de realizar la prueba, quite el capuchón. Coloque la cubierta de la lanceta que guardó sobre una superficie firme y plana, y presione la punta expuesta de la lanceta dentro de la cubierta de la lanceta. Retire la lanceta del soporte y deseche la lanceta usada en un contenedor apropiado.

La muestra de sangre capilar se puede extraer de la oreja o de la almohadilla de la pata de perros y gatos.

**Solicítelle a su veterinario instrucciones sobre cómo obtener una muestra de sangre de la oreja o de la almohadilla de la pata.**



Consulte el Manual del usuario para obtener información completa sobre el sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™ e instrucciones sobre cómo hacer una lectura de glucosa en la sangre.

### - L I M P I E Z A Y D E S I N F E C C I Ó N D E L D I S P O S I T I V O D E P U N CIÓN -

- El proceso de limpieza y desinfección consta de dos pasos. El primer paso es la limpieza. La limpieza elimina la sangre, los líquidos, el polvo o la suciedad. El segundo paso es la desinfección. La desinfección elimina la mayoría de los posibles agentes infecciosos, aunque no todos, incluso los patógenos contenidos en la sangre. **La limpieza se debe realizar antes de la desinfección.**
- Limpie el dispositivo de punción de inmediato si ve que tiene sangre o está sucio.
- Retire la lanceta del dispositivo de punción antes de limpiarlo.
- Limpie y desinfecte el dispositivo de punción al menos una vez a la semana. El dispositivo de punción se puede limpiar y desinfectar una vez al día durante 3 años.
- **Use únicamente paños de limpieza Super Sani-Cloth® de PDI** (n.º de registro de la EPA 9480-4). Otros desinfectantes no se sometieron a prueba y pueden dañar el dispositivo de punción. Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI pueden adquirirse en los siguientes sitios: Amazon.com, OfficeDepot.com (o su tienda local de Office Depot) o Walmart.com.
- Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI se sometieron a prueba en el dispositivo de punción durante un total de 1095 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el dispositivo de punción una vez al día durante 3 años.

	<b>Para limpiar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lávese bien las manos con agua y jabón.</li><li>2. Limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción con un paño de limpieza Super Sani-Cloth; para ello, realice 3 movimientos circulares. Deseche el paño usado.</li></ol>
	<b>Para desinfectar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Siempre limpie el dispositivo de punción inmediatamente antes de desinfectarlo</b> (consulte las instrucciones anteriores).</li><li>2. Saque un paño de limpieza Super Sani-Cloth nuevo y limpíe bien toda la superficie externa del dispositivo de punción; para ello, realice 3 movimientos circulares. Asegúrese de repasar toda la superficie del dispositivo de punción.</li><li>3. Con paños nuevos, si fuera necesario, <b>dé golpecitos sobre toda la superficie externa del dispositivo de punción para asegurarse de que permanezca húmeda durante 2 minutos.</b> Deseche los paños usados.</li><li>4. Deje secar bien el dispositivo de punción al aire antes de usarlo.</li><li>5. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del instrumento y presione el botón disparador. Escuchará un clic si el dispositivo de punción funciona correctamente.</li><li>6. Lávese bien las manos al finalizar.</li></ol>

**Importante!** Deje de usar el dispositivo de punción y comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda si sucede lo siguiente:

- Las marcas en el dispositivo de punción están desapareciendo. • Es difícil presionar el botón disparador.
- No se puede volver a colocar el capuchón. • El cuerpo del dispositivo no hace clic cuando se lo tira suavemente hacia atrás.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Trividia Health, Inc. Healthy Tracks for Pets, Test Buddy y el logotipo de Trividia Health son marcas comerciales de Trividia Health, Inc.

Fabricado para:

TRIVIDIA HEALTH™

Fort Lauderdale, FL 33309 EE. UU.

1-800-803-6025

Made in China